



Helt enkelt EN

Pålitlig

Universal

Estetisk

Icke
teknikkänslig

Enkel

G-CEM ONE™

Självadhesivt
Resincement



3M




Since 1921
100 years of Quality in Dental

The ONE... som förenklar!

G-CEM ONE är en sann **universal, icke-teknikkänsligt** cement med **hög bondingstyrka** och en utomordentlig förmåga att självhärda. Det förenklar **alla dina cementeringsprocedurer** och ger dig mer förutsägbara resultat. G-CEM ONE kan användas för ett brett spektrum av indikationer, inklusive utmanande kliniska situationer tack vare **GC Touch Cure**.

GC Touch Cure

Den kemiska initiatoren i **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** kommer att påskynda den kemiska härdningen av cementet från tandytan för att säkerställa en stabil binding.

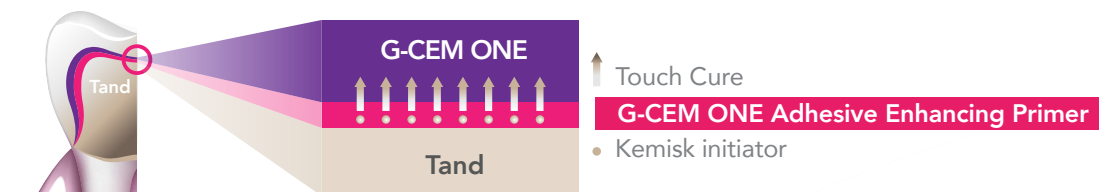


Pålitlig

Optimal bindingsstyrka för rententiva och icke-rententiva¹ preparationer tack vare dess unika GC Touch Cure kapacitet av den **valfria G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**.

Icke-teknikkänslig

Exceptionell självhärdning
punktljushärdningsfunktion för enkel borttagning
och rengöring av överskott,
fukt- och salivtolerant¹,
optimerat flöde av cementet
och praktiskt taget ingen post-operativ känslighet³.

Optimerad självhärdning

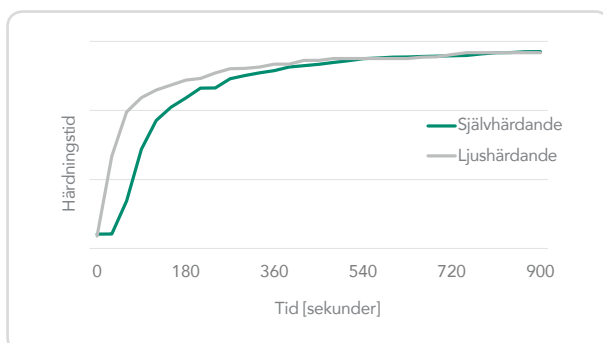

Källa:
Prof. Miyazaki, Nihon University, Japan

¹ Med G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

² Med G-Multi PRIMER

³ Intervjuundersökning. Endast G-CEM ONE. Data på fil



The ONE... som förenklar!

Valfritt - G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

För alla abutments och kaviteter

- MDP: bindning till tandstruktur, Zirkonia och icke ädelmetall
- 4-MET: bindning till tandstruktur
- MDTP: bindning till ädelmetall
- Accelerator $\Rightarrow$ Stark bindning till abutments med hjälp av funktionen hos **GC Touch Cure**.



Ingen ljushärdning.

Vänta 10 sek

Starkt lufttryck 5 sek

Universal

Utmärkt bindningsstyrka till tand och alla material:

Emalj, Dentin, Zirkonia, Metall, Glaskeramik², Hybridkeramer².

Estetisk

Osynliga marginaler
för estetiska resultat.

Enkel

Minskad lagerhållning
och lättare arbetsflöde.

Ett utförande, oavsett translucens



Metall




Litiumdisilikat

Med tillstånd av
Dr. Kazunori Otani, Japan


Courtesy of
Dr. Akimasa Tsujimoto, Japan

The ONE... du kan lita på!

Ett cement för överlägsen bindningsstyrka för alla material

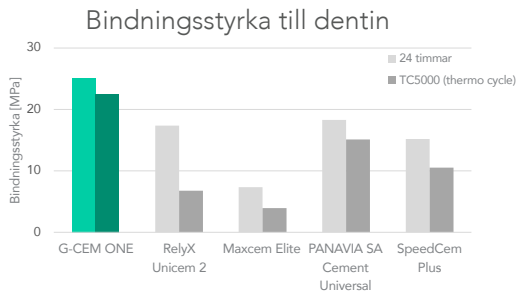


Källa: GC R&D, Data på fil.

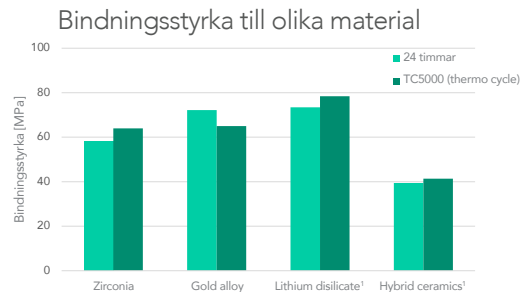


Källa: GC R&D, Data på fil.
¹ Med G-Multi PRIMER

En primer för kliniska utmaningar

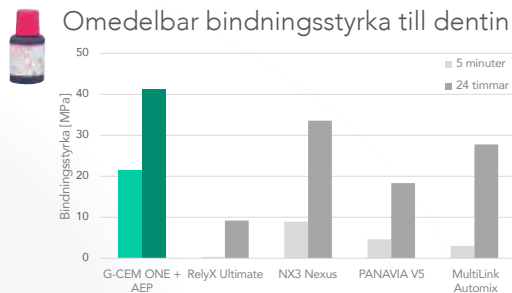

Källa: GC R&D, Data på fil.

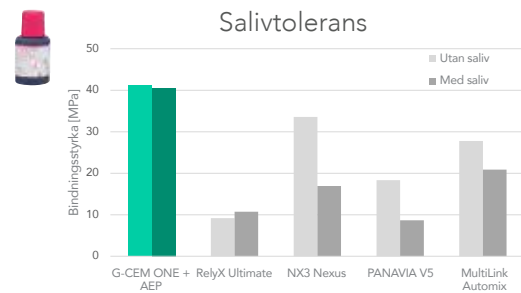


Källa: GC R&D, Data på fil.

Omedelbar bindningsstyrka för att undvika tidig debonding i icke-retentiva fall och CAD/CAM framställda kronor.

Adhesive Enhancing Primer säkerställer hög bindningsstyrka, även vid salivkontamination.

En osynlig marginal för estetiska resultat

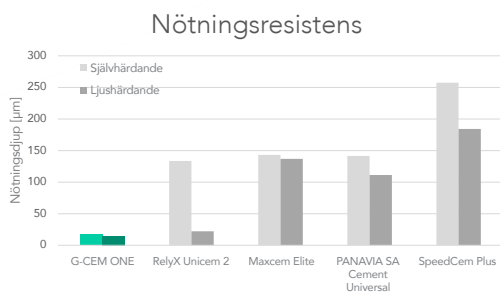

Källa: GC R&D, Data på fil.



Före behandling



Efter 6 månader

Med tillåtelse av Dr. Masayuki Okawa, Japan

Tunn filmtjocklek (5 µm) och hög nötningsresistens bibehåller den osynliga marginalen.



Med den valfria G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

The ONE... klinisk partner!

Ett optimerat flöde



Enkelt att avlägsna överskott efter 1 sekunds punkthärdning



Med tillstånd av
Dr. Kazunori Otani, Japan

En för alla kliniska fall

Posterior Kronta (Zirkonia)



Preparerad tand rengjord och torkad.



Cementerad restauration.



Slutresultat.

Med tillstånd av
Dr. Kazunori Otani, Japan



Anterior Kronta (Litiumdisilikat)



Preparerad tand rengjord och torkad.



Applicering av G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.



Slutresultat.

Med tillstånd av
Dr. Kazunori Otani, Japan



Posteriort Onlay (Litiumdisilikat)



Initial situation.



Cementerad restauration tillsammans med G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.



Slutresultat.

Med tillstånd av
Dr. Riccardo Tempesta, Italy



Med den valfria G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Förpackningar

ARTIKEL-NUMMER

Beskrivning

10006918	G-CEM ONE Starter Kit A2
10006919	G-CEM ONE Starter Kit Translucent
10006920	G-CEM ONE System Kit
10006921	G-CEM ONE Twin Refill A2
10006922	G-CEM ONE Twin Refill Translucent
10006923	G-CEM ONE Single Refill AO3
10006924	G-CEM ONE Single Refill White Opaque
10006925	G-CEM ONE Value Refill A2
10006926	G-CEM ONE Value Refill Translucent
10006833	G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer



G-CEM ONE System Kit




G-CEM ONE Starter Kit



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Färgskala

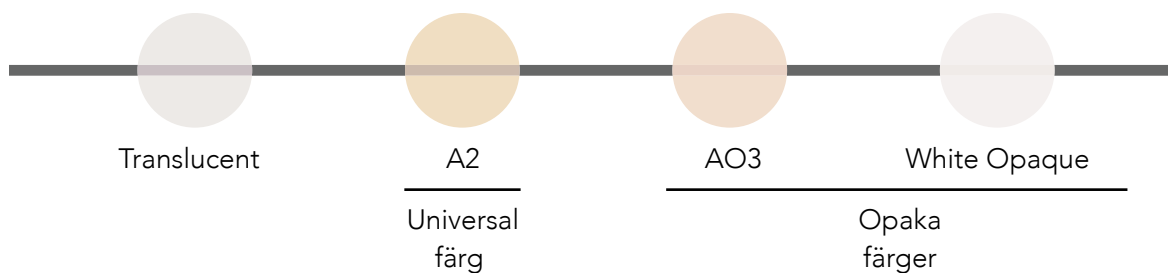

Relaterade produkter



G-Multi PRIMER
Universal Primer



D-Light® Pro
LED hårdljuslampa
med Dubbel
våglängd



FREEGENOL
Temporärt cement

G-Multi PRIMER, D-Light® Pro and FREEGENOL are trademarks of GC.

RelyX Unicem, RelyX Ultime, Maxcem Elite, PANAVIA SA Cement Universal, PANAVIA V5, SpeedCem Plus, NX3 Nexus and Multilink Automix are not trademarks of GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://europe.gc.dental>

GC NORDIC AB

c/o Lundin Revisionbyrå
Erik Dahlbergsgatan 11B
SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental
<https://europe.gc.dental/sv-SE>

